




Quick Start Guide

instaLINK™ Wearable Smart Phone Alert
Model iL-100




Feature Identifications:

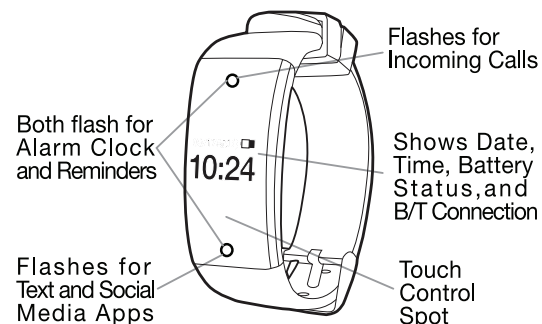

Charging instaLINK:

Charge instaLINK for 2 hours before first use as shown below.

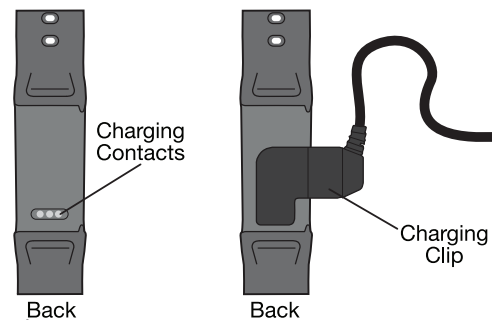

Download App:

1. Go to the App Store or Google Play and search for the “SERENE LINK” App by Serene Innovations Inc.
2. Download and install the free App on your iOS or Android device.

Pairing instaLINK to your Smartphone:

1. Turn the instaLINK “ON” by placing finger on touch control spot until the word “Welcome” appears. (fig. A)
2. Make sure your smartphone’s Bluetooth™ function is turned “ON”.

Pairing instaLINK to your Smartphone (CONT.):

3. Tap and open the “SERENE LINK” App. The App will start searching for the nearby instaLINK to complete the pairing process. Press “PAIR” when it appears on screen. (Note: Pairing is done via the App only)
4. When pairing is complete, a small Bluetooth icon will appear on the instaLINK’s display.



Setting Up Alert Notifications:

Follow the App to:

1. Set Date and Time (12 or 24 Hour Clock)
2. Set Alarm Times (Up to 8 Alarms)
3. Set Medicine Reminder Times (Up to 8 Reminders)
4. Select Notifications for:
 - Incoming Calls
 - Text/SMS
 - Social Media Apps: Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp, etc.

Alert for Incoming Calls:

1. instaLINK will Vibrate up to 5 Times and then stop. After vibration has stopped, nothing will be shown on the display.

Reviewing Missed Calls:

1. When nothing is on display, tap the Touch Control spot once to show display, then tap touch control spot again.
2. A handset icon will appear on the display.
3. Place finger on Touch Control Spot for 2 seconds again and missed call will appear.
4. Tap the Touch Control Spot once to cycle through 5 most recent missed calls.

Clearing Missed Calls:

1. While reviewing missed calls, place finger on Touch Control Spot for 2 seconds.
2. The message “DELETE ALL” will appear on the display.
3. Place finger on Touch Control Spot for 2 seconds again and all calls will be cleared.
4. After calls are cleared, there will be nothing on the display.

Alert for Text or Social Media Apps:

1. instaLINK will Vibrate 3 Times and then stop. After vibration has stopped, nothing will be shown on the display. Check missed texts and social media App notifications on phone.

Alert for Alarm Clock/Medicine Reminders:

1. InstaLINK will Vibrate up to 5 Times and then stop. After vibration has stopped, nothing will be shown on the display.

Note: If the InstaLINK is out of range for too long (>1hr.), some Android phones may require relaunching of App and then exit.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
APP Store® is a trademark of Apple Inc
Google Play™ is a trademarks of Google Inc.

Need Help? Call Toll-free Help Line:
866-376-9271 (8AM - 5PM PST, M-F)




14731 Carmenita Road, Norwalk, CA 90650
www.sereneinnovations.com

Finished size 3” wide x 4.5” high
Flat size 15” wide x 4.5” high

Guide de démarrage rapide


Alerte de téléphone intelligent pour appareil portable instaLINK™ Modèle iL-100

Identification des fonctionnalités:

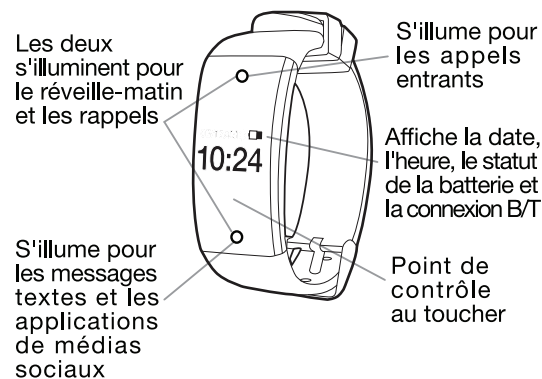

Charger instaLINK:

Charger InstaLINK pendant 2 heures avant la première utilisation comme présenté ci-dessous.

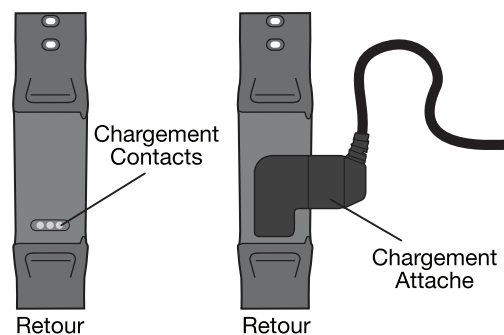

Télécharger l'application:

1. Allez dans l'App Store ou Google Play et recherchez l'application "SERENE LINK" par Serene Innovations Inc.
2. Téléchargez et installez l'application gratuite sur votre appareil iOS ou Android.

Jumelage instaLINK sur téléphone intelligent:

1. Allumez l'instaLINK en plaçant le doigt sur le point de contrôle par le toucher jusqu'à ce que le mot « **Bienvenue** » s'affiche.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth™ de votre téléphone intelligent est activée.
3. Touchez et ouvrez l'application "SERENE LINK". L'application commença à chercher pour l'instaLINK voisin pour compléter le processus de jumelage. Pressez « **JUMELER** » quand elle apparaît à l'écran. (**Note:** Le jumelage est fait via l'application uniquement)
4. Lorsque le jumelage est terminé, une petite icône Bluetooth apparaîtra sur l'affichage de l'instaLINK.



Réglage des notifications d'alerte:

- Suivez l'application pour :
1. Régler la date et l'heure (12 ou 24 heures)
 2. Définir les heures de réveil (jusqu'à 8 alarmes)
 3. Régler le rappel des médicaments (jusqu'à 8 rappels)

Réglage des notifications d'alerte (suite):

4. Sélectionnez notifications pour :
 - Appels entrants
 - Texte / SMS
 - Applications de médias sociaux : Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, etc..

Alerte pour les appels entrants:

1. InstaLINK vibrera jusqu'à 5 fois et puis s'arrêtera. Après l'arrêt de la vibration, rien ne sera montré sur le dispositif d'affichage.

Appels manqués:

1. Lorsque rien n'est sur l'affichage, appuyez sur le point de contrôle tactile une fois pour afficher, puis à nouveau.
2. Une icône de combiné apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur le point de contrôle tactile pendant deux secondes encore une fois et les appels manqués s'affichent.
4. Tapez sur le point de contrôle tactile une fois pour parcourir les cinq derniers appels manqués.

Suppression des appels manqués:

1. Lors de l'examen des appels manqués, placer le doigt sur le point de contrôle tactile pendant deux secondes.

Suppression des appels manqués (suite):

2. Le message « **Tout supprimer** » apparaîtra sur l'écran.
3. Appuyez sur le point de contrôle tactile pendant deux secondes encore une fois et tous les appels seront effacés.
4. Une fois que les appels sont vides, il y aura rien sur l'écran.

Alerte pour les messages textes ou les applications de médias sociaux :

1. InstaLINK vibrera 3 fois et puis arrêtera. Après l'arrêt de la vibration, rien ne sera montré sur le dispositif d'affichage. Vérifiez les textes manqués et les notifications médias sociaux sur le téléphone.

Alerte d'alarme/rappel de médicament:

1. InstaLINK vibrera jusqu'à 5 fois et puis s'arrêtera. Après l'arrêt de la vibration, rien ne sera montré sur le dispositif d'affichage.

Remarque: Si le **instaLINK** est hors de portée pour long (> 1 h.), certains téléphones Android peuvent nécessiter un relancement -Application, puis quitter.